

NEW スマートフットレスト付車いす ラクライズ



足の軽い力だけで簡単に開閉操作が可能な
「スマートフットレスト」を装着した車いす

ラクライズとは?

ラク→楽に、rise→立ち上がる、Luck rise→運氣上昇
という意味を込めてかけ合せた名前です



LRH-50GC
(グリーンチェック)

軽い力で簡単に操作ができるスマートフットレスト



バネの力で半自動で閉じるので、プレートの上げ不足によって足を引っ掛けて発生する転倒事故を回避できます。



折りたたみ時

スマートフットレスト付車いす ラクライズ (自走式 背折れタイプ)



■背折れ・自走 ■介助ブレーキ ■安全ベルト ■アルミフレーム ■耐荷重100kg

¥128,000 (非課税)

品番 LRH-50GC JANコード 4968501-790973

TAISコード 00690-000138

■シートカラー



グリーンチェック
(GC)

仕様

カラー	ー：グリーンチェック
サイズ	ズ：W63.5(30)×D100(89)×H89(66.5)cm ()折りたたみ時
前座高	43cm
後座高	41cm
座面幅	40cm
座面奥行	40cm
バックサポート高	42cm
アームサポート高	21cm
ティッピングレバー径	22.2φ
前輪	6インチ
後輪	22インチ
重量	15.2kg
耐荷重	100kg
主材質	フレーム(アルミ)、キャスター(TPR)、シート(ポリエステル) アームレスト(PU)、フットサポート(PP)
梱包サイズ・重量	W33×D92×H73cm・18.2kg

使用方法 ※使用状況に合わせてレッグサポートを調整して下さい

車いすユーザー の使用方法

足だけで
開閉操作可能!



車いすユーザーは、スマートフットレストに足を乗せ、内側に軽く傾けるだけで開操作が行えます。閉操作はスマートフットレスト底部を足で軽く跳ね上げることで、あとは自動で閉じます。

介助者 の使用方法

直接フットプレートへ
手を触れる事がなく
衛生的!



介助する場合の開閉操作では、介助者は車いすユーザーの足を持ち上げ、スマートフットレストに乗せ、内側に傾けることで開操作を行います。閉操作は車いすユーザーの足を降ろし、介助者がスマートフットレスト底部を足で軽く跳ね上げることで、あとは自動的に閉じます。


フットサポートサイズ比較

従来のフットサポートに比べ面積が広いのでより安心して足をのせられます。
使う時は広く、使わない時はスマートに格納出来ます。

■スマートフットレスト



■通常のフットサポート

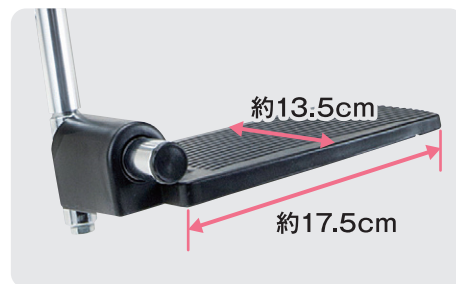

お問合せ[販売店]

考える福祉…I(あい) 4.0

MAKI 株式会社 マキテック

ライフテック事業部

<http://www.makitech.co.jp>

※予告なくURL及び二次元コードが変わる場合があります。
本チラシの仕様は改善の為、予告なく変更する場合があります。
本チラシ掲載製品と実際の製品の色は、印刷の関係で多少異なる場合がございます。



R0603A-0,000 J.