

クラッチ Clutch



アルミ製松葉杖(S・M・L)

■アルミ製支柱

¥5,570(非課税)

品番	MT-S(Y)(S)	JANコード	MT-S(Y) 4968501-946103
	MT-M(Y)(M)		MT-M(Y) 4968501-946202
	MT-L(Y)(L)		MT-L(Y) 4968501-946301
TAISコード			00690-000009

松葉杖を選ぶ目安は、身長から約40cmを引いた長さが目安です。個人差があるので、松葉杖を使うときは専門家のアドバイスを受け、身体にあったものを選んで下さい。

■仕様

カラ	一:つや消シルバー さ:[S]90~110cm 9段階調節(2.5cm間隔) [M]110~130cm 9段階調節(2.5cm間隔) [L]130~150cm 9段階調節(2.5cm間隔)
脇	下:[S]20.5~35.7cm 5段階調節(3.8cm間隔) [M]35.4~50.6cm 5段階調節(3.8cm間隔) [L]42.4~57.6cm 5段階調節(3.8cm間隔)
杖先ゴム	22φ(TG-22YL/P57)

重量: [S]750g [M]800g [L]880g
材質: 支柱(アルミ)、先ゴム・パット・グリップ(TPR)



ロフストランドクラッチ(S・M)




■アルミ製支柱

¥7,900(非課税)

品番	LC-S(BK)	JANコード	LC-S(BK) 4968501-791925
	LC-M(BK)		LC-M(BK) 4968501-792021
TAISコード			LC-S(BK) 00690-000015 LC-M(BK) 00690-000016

■仕様

カラ	一:ブラック
カフ~グリップ	: [S]21.5~26.5cm 3段階調節 [M]24.5~32cm 4段階調節
グリップ~杖先	: [S]52~74.5cm 10段階調節 [M]68.5~91cm 10段階調節
杖先ゴム	22φ(TG-22BK/P57)
重量	[S]620g [M]655g
材質	最大使用者体重: 100kg 質: 支柱(アルミ)、先ゴム(合成ゴム)

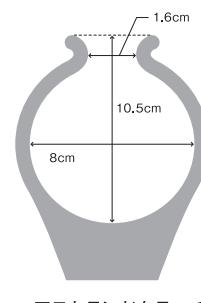

ロフストランドクラッチ
カフサイズ(S・M共通)



オプション



パット(松葉杖用)

¥1,540(税込)(税抜¥1,400)

品番	MT-P(Y)
JANコード	4968501-947605

■仕様

カラ: イエロー



グリップ(松葉杖用)

¥1,540(税込)(税抜¥1,400)

品番	MT-W(Y)
JANコード	4968501-947704

■仕様

カラ: イエロー



杖先替えゴム

※1個入り

¥627(税込)(税抜¥570)

品番	TG-22YL
JANコード	4968501-946400

■仕様

カラ: イエロー
対応サイズ: 22φ



22φ杖先替えゴム

※1個入り

¥627(税込)(税抜¥570)

品番	TG-22BK
JANコード	4968501-999505

■仕様

カラ: ブラック
対応サイズ: 22φ


マキテック

松葉杖・ロフストランドクラッチについて

特徴や長さの合わせ方について


松葉杖

- 2本でしっかり身体を支えるため、安定性を確保でき、体重の多くを上半身で支えることができる、足への負担が軽くなります。
- 松葉杖は骨折、捻挫、股関節症等の症状がある方に向いています。
- 使用される方の身体の状況に合ったサイズで調整して下さい。

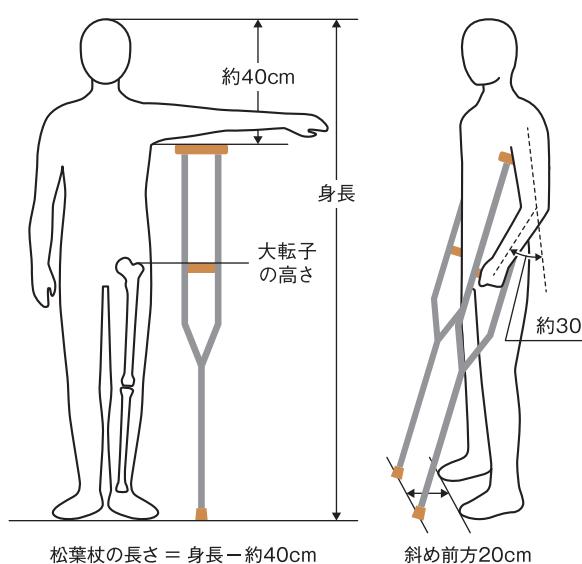


ロフストランドクラッチ

- カフとグリップの2力で体重を補助する為、棒状杖と比べて体重が分散しやすいという特徴があり、握力が弱っている方や体に麻痺がある人に向いています。
- 使用される方の身体の状況に合ったサイズで調整して下さい。

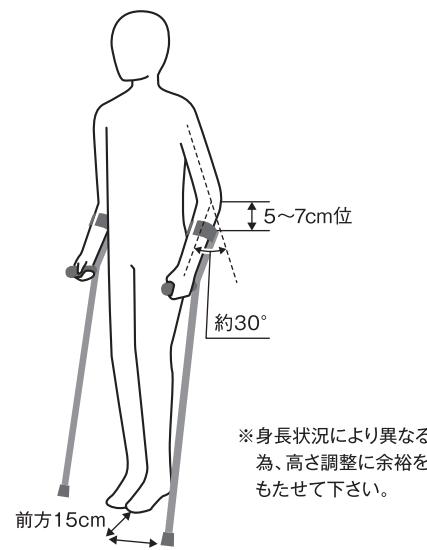


4点支柱杖について

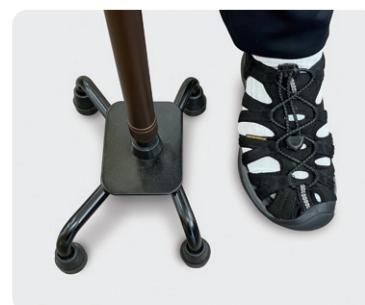

ベースが広いタイプ

- 安定性が高い

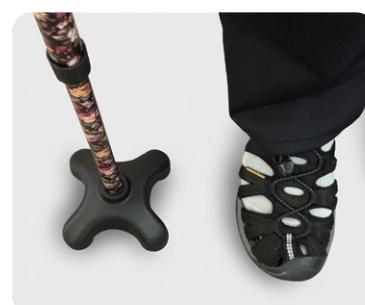

ベースが小さいタイプ

- 狭い場所でも困らない



右利き・左利き簡単切り替え

- 長さ調節ボタンを押しながら180°回転させることにより右利き・左利き用と簡単に切替えができます。
- ※杖先ゴムがより外側に出ている方が体の外側になります。
- ※ベースが広いタイプのみ。



左利き用



右利き用