


オプション



Options

立ち上がりや移乗動作が安心に

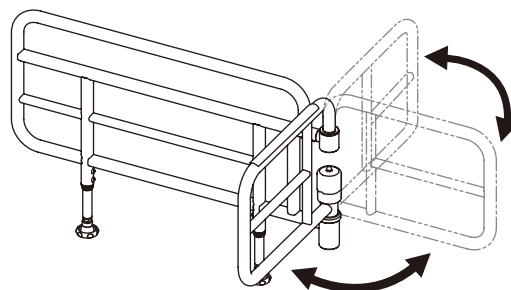

① グリップ

グリップはベッドの外側に15度刻みで固定することができます。目的にあった角度にグリップを回転させてください。

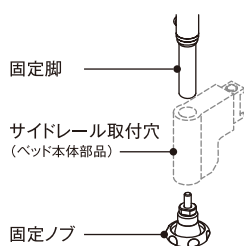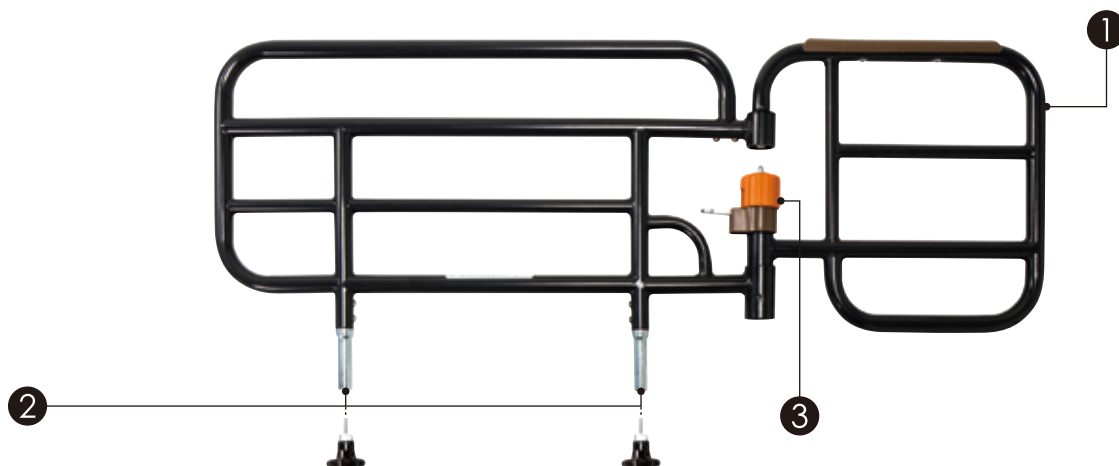

② 固定ノブ

介助バーをベッド本体にあるサイドレール取付穴に差し込み下から、付属の固定ノブを取り付けることで、抜ける心配がなくなります。


③ ロックノブ

【グリップの解除（フリー）】

安全ロックを反時計回りにロック表示が見えなくなるまで完全に回し解除状態にし、ロックノブを上げるとグリップが解除されます。

【グリップの固定（ロック）】

グリップを目的に合った角度に合わせてからロックノブを下げ、安全ロックを時計回りにロック表示が完全に見える位置まで回します。

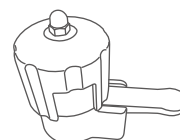


介助バー

¥67,100 (税込) (税抜¥61,000)

品番 LMB-KB JANコード 4968501-946509
TAISコード 00690-000082


■仕様

サイズ W118.5×D5.5×H46.5cm
重量 量：約7.5kg
材質 スチール
パイプ太さ φ25
梱包サイズ W122×D55×H8cm・10kg

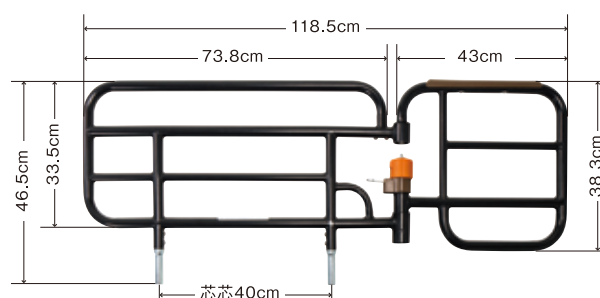

オプション

Options

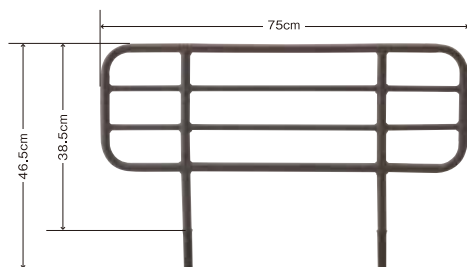


サイドレールS (2本組)

¥15,400 (税込)
(税抜¥14,000)

■仕様

品番	LMB-SR-S	サイズ	W75×H46.5cm
JANコード	4968501-948909	重量	約2.1kg(1本)
TAISコード	00690-000081	材質	スチール
		梱包サイズ	W78.5×D50×H6cm・5.2kg

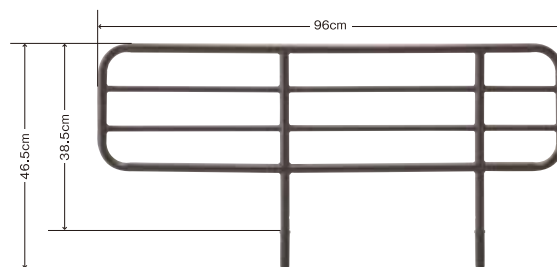

サイドレールL (2本組)

¥19,470 (税込)
(税抜¥17,700)

■仕様

品番	LMB-SR-L	サイズ	W96×H46.5cm
JANコード	4968501-933608	重量	約2.4kg(1本)
TAISコード	00690-000067	材質	スチール
		梱包サイズ	W97×D49×H5.5cm・6kg

グレードアップオプション

1モーターベッドから2モーター、および3モーターベッドへのグレードアップが可能です。

2Mリモコン


¥オープン

品番	LMB-RC2
JANコード	4968501-935503

3Mリモコン

¥オープン

品番	LMB-RC3
JANコード	4968501-935602

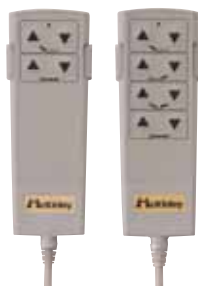

昇降ユニット

¥オープン

品番	LMB-UD
JANコード	4968501-935404



足上専用シリンダー

¥オープン

品番	LMB-FS
JANコード	4968501-935701



キャスター 75φ

(ストッパー付き2個・ストッパー無し2個)

¥20,900 (税込) (税抜¥19,000)

品番	RC-075	JANコード	4968501-858307
----	--------	--------	----------------

■仕様

サイズ	ズ：車輪軸5.9cm、取付高さ9.2cm 高さ11.7cm、車輪径75φ
重量	量：1,190g(4コ)
車輪材質	質：ウレタン(ナイロン・ウレタン巻)

※取付により、床面高さ3.7cm高くなります。



キャスター 60φ

(ストッパー付き2個・ストッパー無し2個)

¥16,720 (税込) (税抜¥15,200)

品番	RC-060	JANコード	4968501-858406
----	--------	--------	----------------

■仕様

サイズ	ズ：車輪軸5.5cm、取付高さ7.3cm 高さ9.5cm、車輪径60φ
重量	量：670g(4コ)
車輪材質	質：ナイロン

※取付により、床面高さ1.8cm高くなります。



アジャスター

(高さ調節用7cm延長脚 4個組)

¥オープン

品番	LMB-AJ70
JANコード	4968501-933806

■仕様

サイズ	ズ：取付高さ7cm
材質	質：スチール